

# 毎日の健康管理に！

## 指先で血中酸素ウェルネス！

OXI NAVIはパルスオキシメーターのように健康管理目的で血液中の酸素飽和度の管理もできるウェルネス機器です。

TOAMIT®

毎日の健康管理で  
自分を守る



アウトドアに役立つ4つの機能(コンパス付き)

血中酸素飽和度

脈拍数機能

カウンター機能

ストップウォッチ機能

様々な用途で  
お使いください



フィットネス



トレッキング



ウォーキング


どれくらいが標準※？

**血中酸素飽和度**  
標準値は96~99%<sup>※</sup>と言われています。  
※日本呼吸学会HPより

**脈拍数**  
一般成人 60~100<sup>※</sup>(安静時)  
※千葉県医師会公表資料より  
※一般に言われている基準です。  
ご不安な方は専門の病院等でご相談ください。

ワンタッチ操作で簡単計測


ワンタッチ操作で  
血中酸素飽和度と  
脈拍数を測定します。

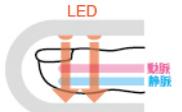

指を機器の中に入れてLEDの光を血管に当て、その透過光を測定します。



見やすいディスプレイ表示※

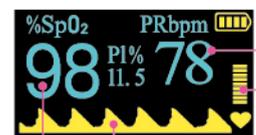

脈拍数  
脈拍棒  
グラフ  
脈拍波形  
血中酸素飽和度

※回転可能で縦表示もできます。

HEALTH MANAGEMENT DEVICE

# OXI NAVI

オキシナビ

品名：OXINAVI(オキシナビ) 型番：TOA-OXINV-001 JAN：4562441908827 入数：100個

製品仕様：・表示画面 TFT-LCD ディスプレイ ・測定方法 2波長分光測定法 ・測定範囲：酸素飽和度 70~100% 脈拍数 30~250BPM ・測定精度：酸素飽和度 70~100%±2% ・脈拍数 ±2% または ±2 拍分 ・電源 単 4 型 1.5V×2 本 本体：サイズ：(約)W64×D39×H37(mm) ・本体重量 43g(バッテリー含まず) ・使用温度 5~40℃/15~80%RH ・保存温度湿度 -10~40℃/10~80%RH ・原産国：中国

血中酸素ウェルネス機能は、一般的な健康維持のみを目的としたものであり、医療目的で使用したり、判断したりするためのものではありません。質問や健康上の問題がある場合は、医療の専門家に必ず相談してください。※本製品はスポーツ用品・ウェルネス機器であり、医療機器ではありません。

・・・ お申し込みは ・・・

(販売価格： 2,750円 税込)

(株)ダイワグループ OXI NAVI オキシナビ 係 (法人営業部) 月~金 10:00~17:00

Tel: 03-5377-1381 Fax: 03-3314-6094 e-mail: info@kokusairyoko.com

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-27-17 恒陽サンクレスト高円寺ビル903

製造販売元： (株)東亜産業

\* F A X 専用ご注文書はこちらより